

膠囊/錠劑數粒機 CVC 1000-TS



簡易且可靠設計的數粒機:

錠劑/膠囊由不鏽鋼料斗透過振動軌道輸送 至轉盤,藉由轉盤軌道與離心力作用,達 到藥粒分離與排列效果,整列的藥錠經電 眼計數後填充入瓶。

全自動操作,適用於藥廠與保健食品廠等 藥錠膠囊瓶裝計數充填。雙軌輸送帶,配 搭入瓶分流與出瓶合流設計,可易於整合 到自動化生產線。

機台特色

- · 雙頭數粒及雙軌輸送帶, 一次計數充填兩瓶。
- ·觸控螢幕HMI易於操控及參數設定。
- · 簡易操作與調整,極簡化的保養以及產品快速更換等特點,讓CVC 1000-TS成為全球製藥產業,最受歡迎的數粒機之一。
- · 搭配輸送帶,可易於與客戶現有產線整合。
- ·真空集塵配管,對易產生粉塵的藥錠可有效 去粉塵,確保高精度計數(真空集塵機由客戶 提供)。
- ·可廣泛適用各種國際標準尺寸的膠囊與一般 圓形錠劑產品等。
- ·符合cGMP規範的設計結構。



	CVC 1000-TS 機 器 規 格
產能	藥錠最高可達每分鐘 2,000-4,000 顆 膠囊最高可達每分鐘 1,200-2,000 顆 (需依客戶樣品實測為準)
	圓錠直徑: 3.5-15 mm; 厚度: 3.5-10 mm 硬殼膠囊: #00~#5 (種類眾多,需依客戶樣品實測為準)
適用尺寸	瓶子: 瓶徑: Ø40-75 mm 瓶口內徑: Ø25-75 mm 瓶高: 60-160 mm
電 壓	110 V/ 220 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	110 V: 1,200 VA (10.9 A)/ 220 V: 1,200 VA (5.5 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	99 NL/min (3.5 CFM)
機 器 尺 寸 [長x寬x高]	2,500 x 1,025 x 1,636 mm
機器淨重	300 kg
噪 音 值	≤ 78 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等, 僅供參考,如有更改,恕不另行通知。

技 術 規 格


選購配備

- ・集塵機
- · 轉盤及下料出口防塵罩




機器視圖

上視圖

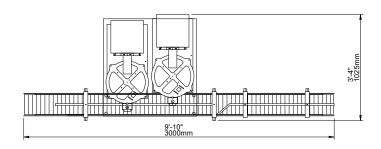

正視圖

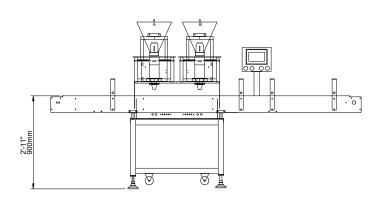

刊載機台設備功能、規格及圖片等, 僅供參考,如有更改,恕不另行通知。





聯絡我們

亞太總部 - 台灣 台中市大里區工業九路190號 Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555 www.cvctechnologies.com; www.cvcusa.com sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337 Phone: +1 (909) 355-0311 sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314 Phone: +86 (512) 8363-6368 sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080 Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243 sales@cvctechnologies.com