

# 膠囊/錠劑 數粒機

## CVC 1220-CS




CVC 1220-CS 數粒機適用各種生產線的需求；100%數粒準確度傲視群倫，長期運轉穩定，好操作，廣受全球各大藥廠歡迎。

精煉俐落的工藝設計是CVC 1220-C 無與匹敵的絕對優勢，簡約的機構設計，大幅簡化複雜的養護流程。

全機無縫式結構設計，可搭配單出口與雙出口，搭配中央集塵裝置，大幅降低粉塵影響數粒準確度、元件穩定性及污染機率。搭載伺服馬動驅動，可搭配先進的工業電腦控制系統，完全符合 FDA 21CFR Part11 嚴格規範。

### 機台特色：

- 可搭配單出口與雙出口。
- 落粒閘門單元組能準確藥粒分離，更精準確保藥粒數量。
- 不同藥粒不需更換件。
- 每瓶數粒數量設定，可從 1-9999 粒。
- 不鏽鋼拋光處理平滑表面，採用無縫式焊接，杜絕粉塵累積。
- 特殊設計的多重數粒電眼，不受藥粒及粉塵影響，補償檢測光源，透明膠囊亦可適用；當粉塵附著時，電腦能自動調整電眼感應度、強度，數粒不受影響；若附著過多粉塵，機器會警示並自動停機，以確保數粒正確。
- 與藥錠接觸的機件，皆以不鏽鋼SS316 及 FDA 核准的材質製成。
- 適用於各種尺寸、形狀及顏色的膠囊、錠劑或軟膠囊，即使是溼度高且大小不一的中藥藥丸，採用電子式高頻振動紅外線計數，仍維持一貫的數粒精準度。
- 可選購符合21CFR Part11 的工業電腦觸控螢幕組。

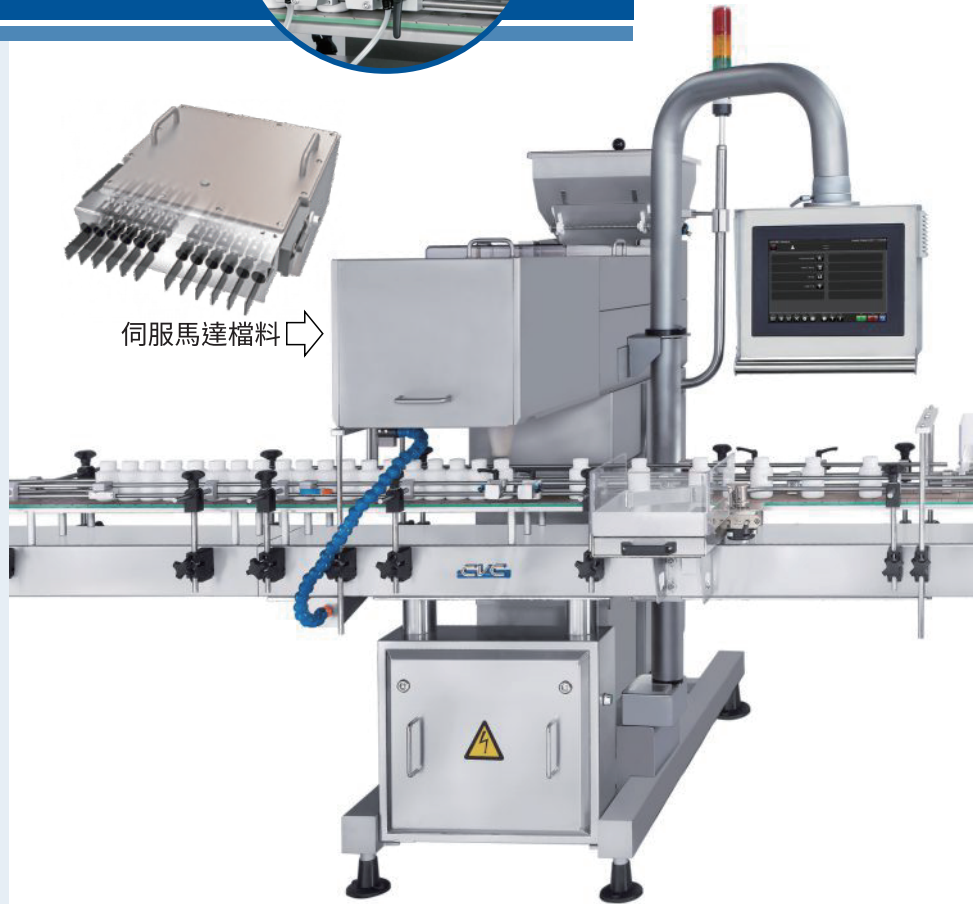

伺服馬達檔料

### CVC 1220CS 機器規格

產 能	最高可達每分鐘單出口 55 ±5 瓶，雙出口 85 ±5 瓶 (採用 60cc 圓瓶，計數 8mm 雙凸圓錠，每瓶 60 數之實測速度) 最高可達每分鐘單/雙出口 6 ±1 瓶 (採用 1300cc 圓瓶，計數 8mm 雙凸圓錠，每瓶 1000 數之實測速度) (以上需依客戶樣品實測為準)
適 用 尺 寸	藥錠： 長度: 2-30 mm 寬度/圓徑: 2-20 mm 瓶子： 瓶徑: Ø30-120 mm 瓶高: 40-200 mm
料 斗 容 量	35 L
電 壓	230 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	950 VA (4.2 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	25 NL/MIN. (1CFM)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	680 x 1,780 x 1,870 mm
機 器 淨 重	475 kg
噪 音 值	75-80 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，  
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

# 技術規格

## 選購配備：

- 衛生級輸送帶組。
- 料倉低粒位檢測(含警示燈)。
- 倒瓶/瓶倒置檢測電眼。
- 瓶出口堵塞電眼。
- 排瓶確效。
- 破片檢出。
- 真空吸塵裝置。
- 氣缸檢測組。
- 氮氣充填。
- 補料機。
- OPC UA 用於生產數據採集。
- TST & 21CFR part11。




選配：膠囊/錠劑補料機




伺服馬達檔料

## 機器視圖

### 上視圖

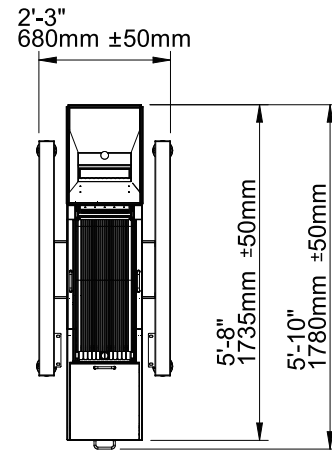

### 正視圖

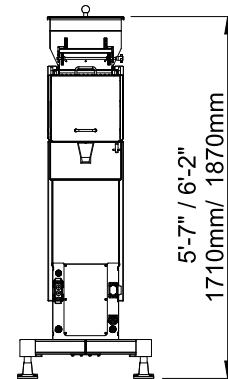

上述相關機器尺寸適用於標準機型。機器尺寸與規格資料如有變動恕不另行通知，亦可至官網查詢。本機可以獨立運行，也可整合到自動包裝線中。所有 CVC 設備均享有一年保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



CVC TECHNOLOGIES, INC.  
皇將科技股份有限公司



## 聯絡我們

### 亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號  
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555  
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com  
sales@cvctechnologies.com

### USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337  
Phone: +1 (909) 355-0311  
sales@cvcusa.com

### 中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314  
Phone: +86 (512) 8363-6368  
sales@cvctechnologies.com

### 印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080  
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243  
sales@cvctechnologies.com