

膠囊/錠劑 數粒機 CVC 1220-C




CVC 1220-C 數粒機適用各種生產線的需求；100% 數粒準確度傲視群倫，長期運轉穩定，好操作，廣受全球各大藥廠歡迎。

精煉俐落的工藝設計是 CVC 1220-C 無與匹敵的絕對優勢，簡約的機構設計，大幅簡化複雜的養護流程。

全機無縫式結構設計，搭配中央集塵裝置，大幅降低粉塵影響數粒準確度、元件穩定性及污染機率。搭載先進的工業電腦控制系統，完全符合 FDA 21CFR Part11 嚴格規範。

機台特色：

- 不同藥粒不需更換件。
- 每瓶數粒數量設定，可從 1-9999 粒。
- 不鏽鋼拋光處理平滑表面，採用無縫式焊接，杜絕粉塵累積。
- 特殊設計的多重數粒電眼，不受藥粒及粉塵影響，補償檢測光源，透明膠囊亦可適用；當粉塵附著時，電腦能自動調整電眼感應度、強度，數粒不受影響；若附著過多粉塵，機器會警示並自動停機，以確保數粒正確。
- 與藥錠接觸的機件，皆以不鏽鋼 SS316 及 FDA 核准的材質製成。
- 適用於各種尺寸、形狀及顏色的膠囊、錠劑或軟膠囊，即使是溼度高且大小不一的中藥藥丸，採用電子式高頻振動紅外線計數，仍維持一貫的數粒精準度。
- 可選購符合 21CFR Part11 的工業電腦觸控螢幕組。

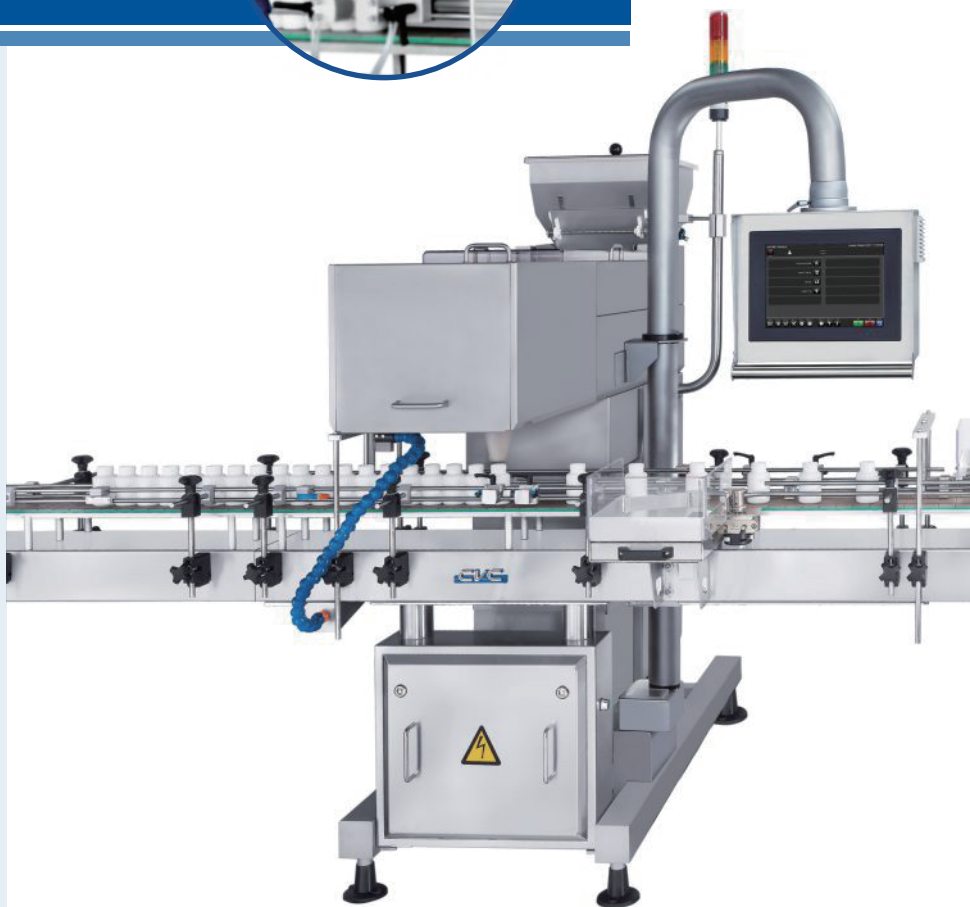

CVC 1220C 機器規格

產 能	最高可達每分鐘 60-70 瓶，搭配雙出料口 (以 40-100 cc 圓瓶測試，需依客戶樣品實測為準)
適 用 尺 寸	藥錠： 長度: 2-30 mm 寬度/圓徑: 2-20 mm 瓶子： 瓶徑: Ø20-105 mm 瓶高: 40-200 mm
料 斗 容 量	35 L
電 壓	230 V, 50/60 HZ, 1 PH
耗 電 量	725 VA (3.2 A)
氣 壓	6 bar (87 psi)
耗 氣 量	200 NL/min (7.1 CFM)
機 器 尺 寸 (長 x 寬 x 高)	680 x 1,780 x 1,870 mm
機 器 淨 重	475 kg
噪 音 值	75-80 dB

刊載機台設備功能、規格及圖片等，
僅供參考，如有更改，恕不另行通知。


技術規格

選購配備：

- 衛生級輸送帶組。
- 料倉低粒位檢測 (含警示燈)。
- 倒瓶 / 瓶倒置檢測電眼。
- 瓶出口堵塞電眼。
- 排瓶確效。
- 破片檢出。
- 真空吸塵裝置。
- 氣缸檢測組。
- 氮氣充填。
- 補料機。
- OPC UA 用於生產數據採集。
- TST & 21CFR part11。




選配：膠囊 / 錠劑補料機

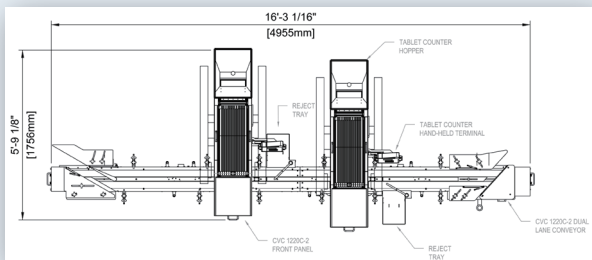


機器視圖

上視圖

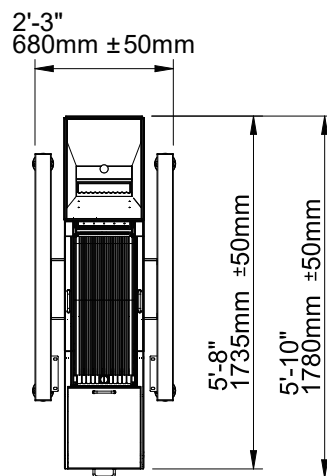

正視圖

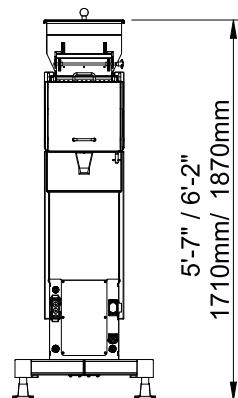

上述相關機器尺寸適用於標準機型。機器尺寸與規格資料如有變動恕不另行通知，亦可至官網查詢。本機可以獨立運行，也可整合到自動包裝線中。所有 CVC 設備均享有一年保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。



CVC TECHNOLOGIES, INC.
皇將科技股份有限公司



聯絡我們

亞太總部 - 台灣

台中市大里區工業九路190號
Phone: 04 2496-3666 Fax: 04 3705-6555
www.cvctechnologies.com ; www.cvcusa.com
sales@cvctechnologies.com

USA

10861 Business Drive, Fontana, CA 92337
Phone: +1 (909) 355-0311
sales@cvcusa.com

中國

昆山市周市镇康庄路77号 郵編: 215314
Phone: +86 (512) 8363-6368
sales@cvctechnologies.com

印度

601/602, Manmandir Suraksha, Building No.3, Nahur Village Road, Mulund (W), Mumbai - 400 080
Phone: +91 (22) 2562-1242, +91 (22) 2562-1243
sales@cvctechnologies.com